


Hold fast i det gennemsigtige hylster så børstedelen ikke springer frem igen. Sæt den lyserøde hætte tilbage på børsten med tommel- og pegefinger. Du vil høre et klik, når hættten er kommet ordentligt på plads.

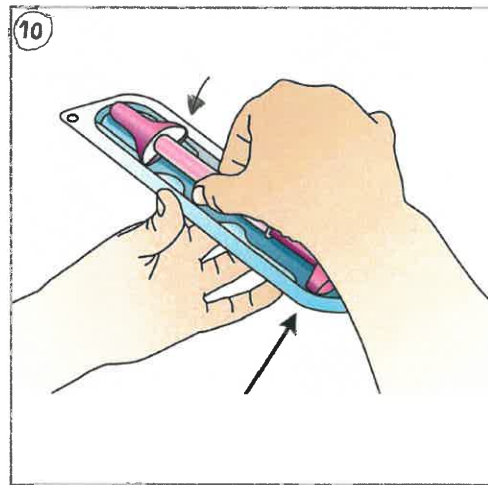

Læg børsten tilbage i den originale indpakning.


# Vejledning

Vejledning til at tage prøve for humant papillomvirus (HPV)  
Screening for livmoderhalskræft


## Almen praksis

Børsten sendes til patologiafdelingen  
sammen med de øvrige cervixcytologiske prøver

## Sådan tager du prøven

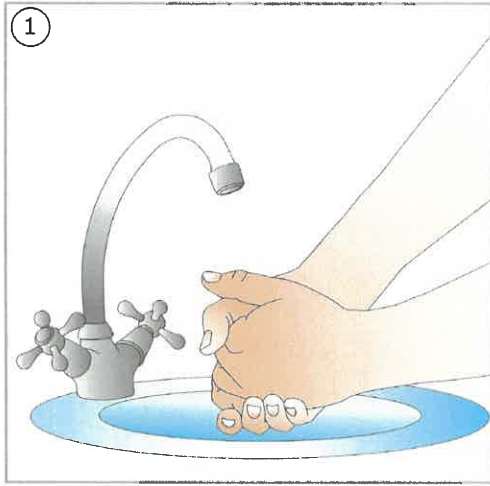


Vask dine hænder før du bruger børsten.

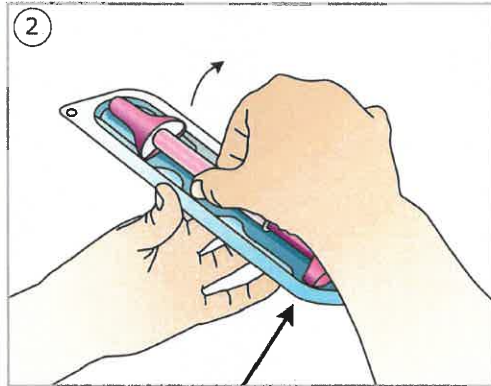


Tag børsten ud af indpakningen. Smid IKKE den tomme indpakning ud, da du skal bruge indpakningen igen senere.

Mærkatens  
skal  
på sættes  
børsten


Rekv. label skal  
på sættes børsten

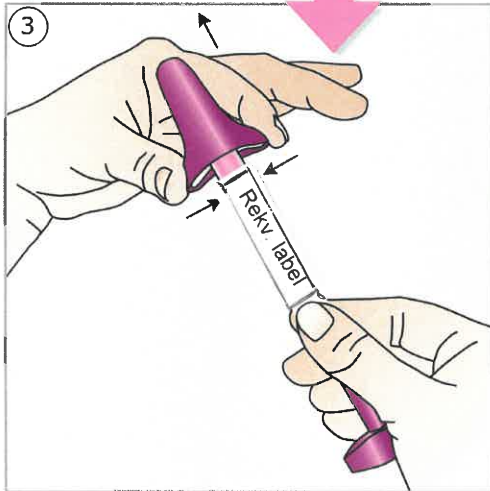


Sæt mærkatens på børsten. Pres ind på siderne af den lyserøde hætte med tommel- og pegefingre for at fjerne hættens. Vær forsigtig ikke at røre ved de hvide børstefibre med dine hænder.

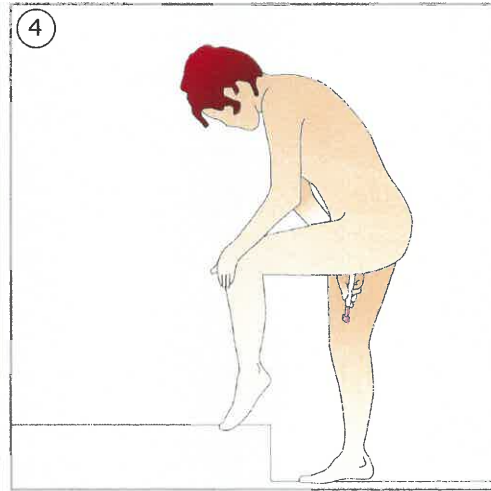


Tag prøven stående. Stil dig så behageligt som muligt, som f.eks. når du skal indføre en tampon.

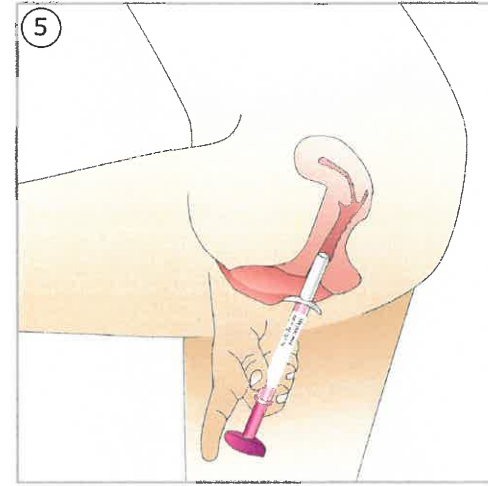


Spred kønslæberne med den ene hånd mens du indfører børsten i skeden med den anden hånd. Børsten skal føres så langt ind, at de hvide vinger støder mod dine kønslæber.

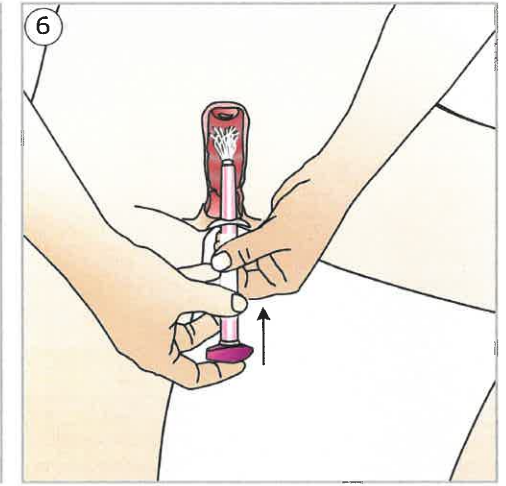

Hold fast i det gennemsigtige hylster med én hånd og tryk det lyserøde stempel ind med den anden. Du vil høre og mærke et klik, når børsten er kommet til den rette position, og stemplet falder i hak på hylsterets kant.

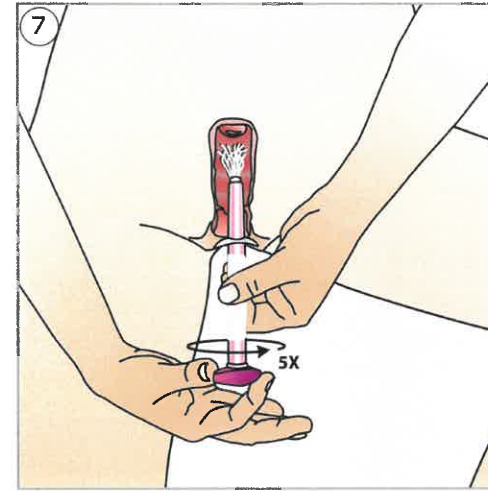

Drej det lyserøde stempel helt rundt fem gange i samme retning. Ved hver hele omdrejning vil du høre et klik. Når du har foretaget fem omdrejninger, fjernes børsten forsigtigt fra skeden.

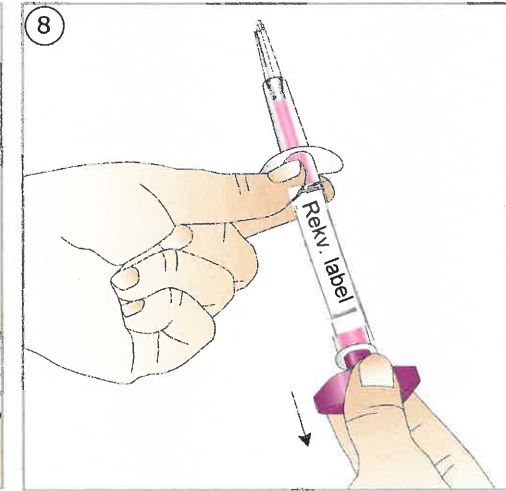

Hold fast i det gennemsigtige hylster med den ene hånd. Træk det lyserøde stempel tilbage med den anden hånd indtil børsten forsvinder ned i røret. Vær forsigtig ikke at røre ved børstens øverste område ovenfor de hvide vinger.